

2008-02-07 Angebot für KOB Kurbetrieb Oberzeiring - Schmetterlingswanne Seite 1

E-Mail an: Herm Dipl.Ing. Gerhard Hanschitz/ZT Büro Dipl. Ing. Hanschitz 2008-02-07

Von: Gudrun Hübner-Kalchgruber

Betreff: Ihre Anfrage Telefax 7.2.2008 an Fa. Trautwein
Unser Angebot - Schmetterlingswanne Ergoform SUW 2100 K

Kundenadresse: KOB Kurbetrieb Oberzeiring
Betriebsführungs GMBH & CO KG
Josef-Mayburger Kal 114/9
A-5020 Salzburg

Sehr geehrter Herr Dipl.Ing. Hanschitz,

zuständigkeitshalber wurde Ihre Anfrage an uns übermittelt zur direkten Bearbeitung.

Wir dürfen nachfolgend die Schmetterlingswanne anbieten und teilen mit, dass im WERK kurzfristig d.h. in 1 Woche (in KW 7) eine Wanne in Farbe WEISS verfügbar wäre. Falls daran konkretes Interesse besteht, so bitten wir um dringende Nachricht, ob Die Wanne für Sie reserviert werden sollte. Ansonsten wäre mit einer Lieferzeit von 6 Wochen zu rechnen. Preisangaben in Euro exkl. 20 % Mwst, inkl. Transport und Aufstellung.

Menge	Beschreibung	Optionen €	Preis EURO
1 Stk	Schmetterlingswanne Fabrikat Trautwein Modell Ergoform SUW 2100 K AU1115 In Serienausführung wie auf Seite 2 beschrieben.		<u>12.460,00</u>
	Gegen Aufpreis lieferbare Optionen nach Wahl:		
	ZU1001 Brauseeinrichtung Mischwasser	147,00	
	ZU1109 Automatische Fülleinrichtung	906,00	
	ZP5100 Sicherungsmaßnahme zum Schutz des Trinkwassers nach DVGW	510,00	
	ZU1011 Notrufsignaleinrichtung	225,00	
	ZU1077 Verstellbare Kopfstütze Schmetterlingswanne	457,00	
	ZU1023 Rückenlehne	276,00	
	ZU1024 Pulsatordüse	255,00	
	ZU1025 Wanneneinsteigetreppe 2-stufig	189,00	
	ZU1026 Wannverkürzer	204,00	
	ZU1150 Halte- und Gymnastikstange	530,00	
	ZU1030 Lagerungsgurt 2100 mm	123,00	
	ZU1032 Kunststoffrost freitragend 1000x500mm	713,00	
	ZU1033 kunststoffmatte 1000x500 mm	105,00	

Zahlung: 30 % Anzahlung, 60 % bei Lieferung, 10 % nach Inbetriebnahme binnen 8 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto.

Gewährleistung: 12 Monate

Mit freundlichem Gruß
Hübner & Partner GMBH

Gudrun Hübner-Kalchgruber e.h.

2008-02-07 Angebot für KOB Kurbetrieb Oberzeiring – Schmetterlingswanne Seite 2

Unterwassermassageanlage in Schmetterlingsform
Modell Ergoform Typ SUW 2100 K Teile-Nr. AU1115

zur Verabreichung von Unterwasserstrahlmassagen und Bewegungsbädern, mit zusätzlichem Bewegungsraum im Kopfbereich, bestehend aus:

Wannenkörper aus doppelschaligem Kunststoff freitragend. Auf 5 höheninstellbaren Füßen mit Gummischutzkappen. Wannennutzinhalt bis 50 mm unter dem Überlauf ca. 1100 l. Farbauswahl für Wanne innen und außen nach Farbpalette.

Abmessungen: innen ca. 2100 x 1900 x 600 mm,
außen ca. 2570 x 1980 x 950 mm.

Wannenausstattung:

3 Haltestangen mit je 2 Halterungen, 1 Kunststoff-Ansaugmuschel mit Filtersieb, 1 Ab- und Überlaufgarnitur 2 ½" mit Axialdichtung, 1 Kunststoffpumpe Leistung 200 l/min, DS 230/400 V, 1,6 kW, IP 44, mit 1 Motorschutzschalter, 1 Schutztrenntrafo 230/24 V TÜV, 1 Ein-Aus-Schalter. Isoliert eingebaute Ventile für Druckregulierung, Kalt- und Warmwasser, Armaturen in Rotguss, 1 Handbrauseeinrichtung mit Brausehalter, 1 Wanneneinlauf aus Kunststoff, 1 Präzisionsmanometer, 2 Anschluß-Hochdruckschläuche, Installation nach DIN 1988, 1 Strahlschlauch, 1 Satz Kunststoffdüsen 40/60/80/100/120/140 mm².

Wannenhigiene nach DIN VDE 0750 (IEC 601-1) und MPBetreibV mit Adisan Reinigungsmittel (ZR0200) und Bayromed Aktiv-Sauerstoff (ZR0100).

CE-Zeichen.

Nachstehende Teile gehören serienmäßig zum Lieferumfang:

Teile-Nr. SU0050

Trockenlaufschutz zum Schutz der Pumpe.

Teile- Nr. SU0070

Fülleinrichtung mit Wanneneinlauf 1 ¼" und Füllventile Kalt- und Warmwasser je 1".

Sonderausstattung: Siehe Übersicht Blatt 08.01.01 und 08.01.02 Zubehör und Sonderausstattung.

Weiteres mögliches Zubehör:



Teile-Nr. ZU1130

Fahrbares Elektroteil Typ GF-WA.

Teile-Nr. ZU 1135

Fahrbares Elektroteil Typ GI-WA.



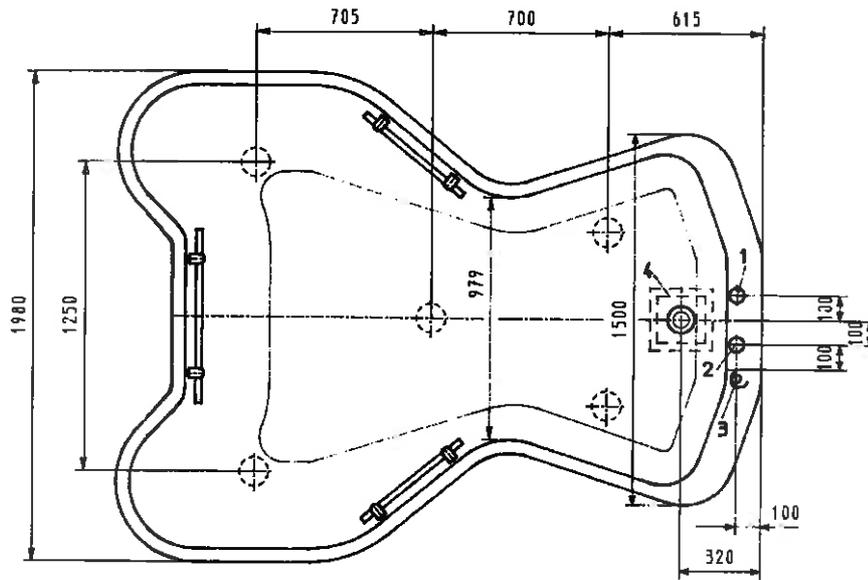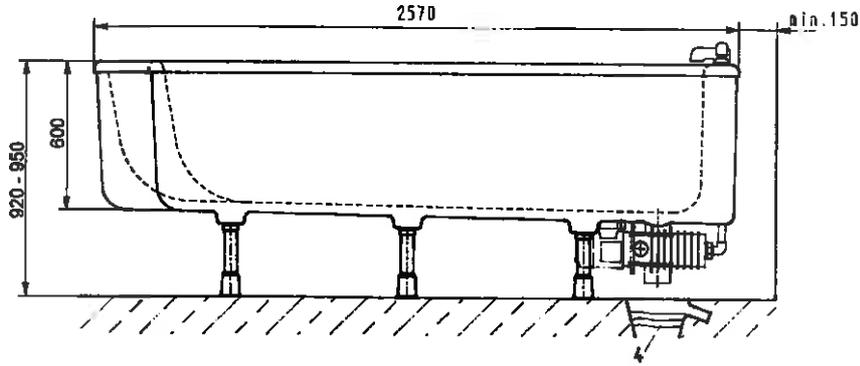

Unterwassermassageanlage in Schmetterlingsform Modell Ergoform
Typ SUW 2100 K Teile-Nr. AU1115

Bauseitige Anschlüsse:

1. Kaltwasser-Muffe 1" bodenbündig @.
2. Warmwasser-Muffe 1" bodenbündig @.
3. Elektr.-Bodenanschluß Kabellänge 1,5 m,
Drehstrom 400 V/3/N/SL 1,5 mm², Motor 1,6 kW, 4,2 A.
4. Ablauf mit Geruchsverschluß DN 100.
40 mm vertieft eingebaut = Leistung 3,5 l/sec.
Bei nicht vertieftem Einbau muß Ablauf der Wanne auf 2 l/sec. gedrosselt werden. Freier Auslauf mind. 10 cm.

Bauseitige Schutzmaßnahmen:

Vorabsperrung Kalt- und Warmwasser.

@ Anschlußstelle mit Sicherungsmaßnahme zum Schutz des Trinkwassers. (DVGW DIN 1988 Teil 4.1) mit Systemtrenner.

Allpoligen Ausschalter innerhalb des Raumes vorsehen.

Fi-Schutzschalter, Nenn-Fehlerstrom max. 30 mA.

Bei elektrogalvanischer Zusatzeinrichtung:

K E I N E Verbindung mit dem Erdpotential. (Geräteklassifikation BF).

Im Handbereich der Wanne 2,50 m nach oben und 1,20 m seitlich dürfen keine leitenden, mit dem Erdpotential verbundenen Teile, Geräte usw. berührbar sein.

Elektroinstallation nach DIN IEC/VDE 0750 Teil 1 + 224.

Bei Ausführung mit Notrufeinrichtung muss ein 2-adriges Kabel verlegt werden.

Mindesttürbreite zum Einbringen: 79 cm.

Achtung: Vor allen Türen durch die die Wanne hindurch soll, muß ausreichend Platz vorhanden sein. Andernfalls ist nur eine Einbringung z.B. durch ein Fenster möglich.

// iban: AT 65 2051 0000 0000 0976 // bic: SPS CAT 21 // sparkasse schwarz
 // uid-nr: atu 37335406 // firmenbuchnummer: 116 263a // internet: www.huebner-spa.com // e-mail: info@huebner-spa.com